

古氏养猪产品目录



古氏公司很荣幸的推出中文第三版的古氏养猪产品目录. 产品目录内新增的产品更进一步迎合现今养猪业的专业需求.

一如既往, 公司的目标是销售高品质的产品, 帮助您的日常养殖工作.

养猪业正在快速发展, 新技术和新产品的出现, 能帮助我们的养殖者提供最好的技术来诊断、治疗和护理家畜.

We are pleased to launch our third KRUUSE Chinese catalogue which contains a lot of interesting products for the professional pig breeding industry.

Our mission is to sell products that improve animal well-being and that help you working with the animals. Today's pig industry is developing fast and new technologies have made it possible for the farmer the best diagnostics, treatments and care.



乔恩.古氏公司Jorgen Kruuse A/S于1896年成立位于丹麦的欧登塞市, 今已成为全球兽医设备和耗材的领先公司. 公司的股权是100%古氏家族拥有, 总部位于丹麦. 在瑞典、挪威、英国、波兰和中国均拥有子公司. 此外, 通过我们的销售网络为全球100个国家提供服务.

Jorgen Kruuse A/S was founded in 1896 in Odense, Denmark and is today the global leader in veterinary equipment and consumables. Jorgen Kruuse A/S is a 100% family owned company with head office in Denmark. Own subsidiaries in Sweden, Norway, UK, Poland and China. Another 100 countries are served via our net work of veterinary wholesalers.





汉克萨斯E系-带导管连接装置

HSW Eco-Matic

最广泛使用的自动填充注射器

德国名牌顶尖品质
 性价比高
 高品质塑料注射管和坚固耐用的塑料注射筒
 坚固耐用的金属针座
 精确,可调整剂量的连续注射设置
 符合人体工程学的设计,使用方便



产品号	规格(可调剂量范围)
950006	汉克萨斯E系注射器2ml-带导管
950004	汉克萨斯E系注射器5ml-带导管

汉克萨斯E系-带导管连接装置

HSW Eco-Matic

- 坚固耐用的塑料瓶套,确保注射液瓶安全固定
- 防止药瓶受到冲击或碰撞
- 方便快捷地更换药瓶
- 只适用50ml和100ml的药瓶,两种流行型号

产品号	规格
950005	汉克萨斯E系注射器0.3cc-带瓶套
950001	汉克萨斯E系注射器2ml-带瓶套
950003	汉克萨斯E系注射器5ml-带瓶套





汉克斯E系-带药瓶套环

HSW ECO-MATIC® with Bottle Mount Universal Collars

- 坚固耐用的塑料瓶套, 确保注射液瓶安全固定
- 防止药瓶受到冲击或碰撞
- 方便快捷地更换药瓶
- 适用于不同大小和形状的所有药瓶
(10, 50, 100, 200, 250 或500ml以及500ml以上)
- 取决于所用的瓶颈环: 白色20毫米, 蓝色30毫米, 绿色33毫米

产品号	规格
950012	0.3ml
950013	0.5ml
950014	1 ml
950015	2 ml
950016	5ml



汉克斯E系双管连续注射器

HSW ECO-MATIC® Twin

- 带有耐用塑料针管的优质塑料注射器
- 符合人体工程学的轻量型设计, 使用方便
- 可独立同时注射接种两种产品疫苗
- 可使用瓶套或软管链接
- 可调节注射针管方向, 操作舒适
- 方便调节注射针管位置
- 提供各种固定剂量的注射针管组合

产品号	规格
950017	0.5 + 0.5ml
950032	0.5 + 2ml
950033	1 + 1ml
950020	2 + 2ml
950021	1 + 2ml

E系注射器药瓶套环



产品号	规格
950022	药瓶套环 Ø 20 mm
950023	药瓶套环 Ø 30 mm
950024	药瓶套环 Ø 33 mm



汉克萨斯自动填充灌服器

HSW ECO-MATIC® Automatic self-filling syringe for oral application

- 专门为牛羊设计或家畜配置多种剂量而设计, 也可选作为注射器
- 人性化、符合人体工程学的设计
- 高强度的材料保证了重量轻, 持续使用, 并且使用寿命长
- 剂量调节轮可设置所需的剂量

产品号	规格
950025	12.5ml
950026	30ml
950027	70ml

汉克萨斯D系自动填充灌服器

HSW DRENCH-MATIC® Automatic self-filling syringe for oral application



- 自动自填充注射器, 可为口服以及浇泼使用输注溶液和悬液也可用于注射
- 压铸铝手柄—强度高, 重量轻使用方便, 清洁方便
- 高强度的塑料针管
- 剂量持续可调节
- 剂量配置精度: 剂量误差<1%
- 手柄平稳压力调节装置
- 创新和符合人体工程学的设计
- 由于配有双密封圈, 所以可自动润滑

产品号	规格
950028	10ml
950029	23ml
950030	30ml



汉克斯E系-配件 塑料瓶套

Cylinder for Eco-Matic

产品号	规格
113113	汉克斯E系注射器-配件, 2ml塑料瓶套
113119	汉克斯E系注射器-配件, 5ml塑料瓶套

产品号	规格
113126	汉克斯E系注射筒, 带有鲁尔锁和接口, 0.3ml
113128	汉克斯E系注射筒, 带有鲁尔锁和接口, 2ml
113129	汉克斯E系注射筒, 带有鲁尔锁和接口, 5ml



汉克斯E系-配件 O型垫圈

O-Ring for Eco-Matic

产品号	规格
113114	汉克斯E系注射器2ml-配件 O型垫圈
113120	汉克斯E系注射器5ml-配件 O型垫圈

产品号	规格
112852	汉克斯M系注射器O型垫圈, 25ml
112853	汉克斯M系注射器O型垫圈, 50ml
996041	汉克斯E系注射器O型垫圈, 0.3ml



汉克斯E系-配件 瓶管连接器

Draw-Off Cap Eco-Matic

产品号	规格
113116	汉克斯E系注射器-配件, 20mm白色瓶管连接器, 适配50ml和100ml药瓶
113117	汉克斯E系注射器-配件, 30mm蓝色瓶管连接器, 适配250ml和500ml药瓶
113118	汉克斯E系注射器-配件, 33mm绿色瓶管连接器, 适配500ml药瓶



汉克斯斯M系注射器

HSW Multi-Matic

最现代化的自动填充注射器

- 非常耐用, 而且轻巧
- 耐用的医用级塑料注射筒
- 对所有已知药物具有耐药性
- 抗紫外线和防折断
- 精确的注射剂量
- 容差<1%
- 剂量设置方便
- 通过手柄上方计量轮, 设置所需剂量
- 0.5ml (25ml) 或1ml (50ml) 剂量范围
- 流线型设计
- 组合简单, 无太多附件
- 人体工程学设计, 使用方便

产品号	规格
112840	汉克斯斯M系注射器-25ml 可调剂量
112841	汉克斯斯M系注射器-50ml 可调剂量
112850	汉克斯斯M系注射器-配件, 25ml注射筒
112851	汉克斯斯M系注射器-配件, 50ml注射筒





汉克斯U系

HSW Uni-Matic

- 给药精准
- 金属注射器活塞, 耐用, 给药精准
- 持瓶器可根据需要调整角度
- 人体工学设计, 使用方便

产品号	规格
113169	汉克斯U系注射器1ml-带导管
113166	汉克斯U系注射器2ml-带导管
113167	汉克斯U系注射器1ml-带瓶套
113168	汉克斯U系注射器2ml-带瓶套

汉克斯U系-配件

HSW Uni-Matic® Spare-part



产品号	规格
113177	玻璃注射筒1ml
113178	玻璃注射筒2ml
113179	全套垫圈弹簧1ml
113180	全套垫圈弹簧2ml
113156	瓶套接口



TPX注射器及配件硅环垫圈

KRUUSE Plexiglass Syringes

高品质TPX材料,更持久耐用

- 注射器 塑料部份用TPX材料制造
- 耐化学品性,耐高温抗老化
- 耐应力开裂,无毒材料
- 不锈钢推动杆
- 坚固锁力强的铜制针座和螺口接头
- 硅环活塞保证推动顺畅
- 美观独立纸盒包装,附额外硅环和针座环各一个

产品号	规格
112318	古氏TPX注射器 - 5ml
112280	古氏TPX注射器 - 10 ml
112285	古氏TPX注射器 - 20 ml
112286	古氏TPX注射器 - 30 ml
112290	古氏TPX注射器 - 50 ml
112281	古氏TPX注射器 - 10 ml可调型号
112287	古氏TPX注射器 - 20 ml可调型号
112295	古氏TPX注射器 - 30 ml可调型号
112289	古氏TPX注射器 - 50 ml可调型号



产品号	规格
112291	TPX注射器 -10ml硅环垫圈
112292	TPX注射器 -20ml硅环垫圈
112298	TPX注射器 -30ml硅环垫圈
112230	TPX注射器 -40ml硅环垫圈

汉克萨斯注射器

使用后操作 AFTER USE

使用后,用含有洗涤剂的热水彻底冲洗注射器,以去除残余物质;然后用洁净的温水将注射器清洗干净.

消毒 DISINFECTION

建议每次使用前及使用后都确保汉克萨斯注射器及相应针头或喷嘴都已消毒.

1. 用灌满热水的瓶子插入注射器接口,使注射筒灌满热水.
2. 将整个汉克萨斯注射器及针头或喷嘴完全浸没在水中,并煮沸20分钟以上.
3. 从水中取出注射器,用纱布包住,保存干燥备用.

润滑 TO LUBRICATE

旋下塑料针筒,使用100%的纯油,冷榨或浸出植物油润滑注射筒和活塞.

请勿使用矿物油、硅油、WD-40、甘油或酒精润滑.
石油类的产品将硬化活塞,缩短使用寿命.



古氏兽医用注射针

KRUUSE-Vet Injection Needles

最高品质,全球供应量第一

- 针管用SUS304 不锈钢制造
- 高质砂盘打磨,针尖锋利,三面刃角,
- 18mm 高的铜座,更换方便
- 铜制鲁尔锁口,使用安全
- 可以接受消毒处理
- 可以重复使用
- 塑料盒包装,每盒12支

产品号	直径x长度mm	G/针号
120602	古氏兽用注射针 0.9x13mm	12/包装
120603	古氏兽用注射针 1.0x10mm	12/包装
120607	古氏兽用注射针 0.8x10mm	12/包装
120612	古氏兽用注射针 1.0x30mm	12/包装
120613	古氏兽用注射针 1.0x15mm	12/包装
120614	古氏兽用注射针 1.0x20mm	12/包装
120615	古氏兽用注射针 1.0x25mm	12/包装
120622	古氏兽用注射针 1.2x40mm	12/包装
120624	古氏兽用注射针 1.2x20mm	12/包装
120625	古氏兽用注射针 1.2x35mm	12/包装
120722	古氏兽用注射针 1.2x15mm	12/包装
120723	古氏兽用注射针 1.2x25mm	12/包装
120728	古氏兽用注射针 1.4x25mm	12/包装
120729	古氏兽用注射针 1.4x35mm	12/包装
120732	古氏兽用注射针 1.4x40mm	12/包装
120733	古氏兽用注射针 1.4x50mm	12/包装
120735	古氏兽用注射针 1.4x20mm	12/包装
120736	古氏兽用注射针 1.6x20mm	12/包装
120742	古氏兽用注射针 1.6x30mm	12/包装
120743	古氏兽用注射针 1.6x13mm	12/包装
120744	古氏兽用注射针 1.6x25mm	12/包装
120745	古氏兽用注射针 1.6x40mm	12/包装
120752	古氏兽用注射针 1.8x25mm	12/包装
120753	古氏兽用注射针 1.8x40mm	12/包装
120755	古氏兽用注射针 2.0x13mm	12/包装
120759	古氏兽用注射针 2.0x20mm	12/包装
120763	古氏兽用注射针 2.0x30mm	12/包装
120824	古氏兽用注射针 2.0x40mm	12/包装
120826	古氏兽用注射针 2.0x50mm	12/包装

PIG BREEDING | 10




注射方法	肌肉注射		皮下注射	
	厚度	长度	厚度	长度
针头 (mm)				
小猪	1.0-1.2	10-20	1.0-1.2	10
断奶仔猪	1,2-1,4	20	1,2-1,4	10
肥育猪	1,4-1,6	25-40	1,4-1,6	10-20
母猪和公猪	1,6	30-40	1,6	20

古氏一次性注射器,带固定针头

KRUUSE Disposable Syringe with Fixed Needle

我们现可为您提供系列新型一次性注射器,带固定针头

- 3件式注射器,鲁尔接头
- 超锐利锐面形针头
- 塑料座,鲁尔锁
- 纸膜撕拉型包装
- 加长刻度,增加了价值(见下面)
- 100支/盒

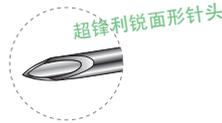

产品号	名称	型号	φ mmx	尺寸号
112416	胰岛素注射器,带固定针头,中头式	0.5ml	0.33 × 12mm	29G × 1/2"
112417	胰岛素注射器,带固定针头,中头式	1ml	0.33 × 12mm	29G × 1/2"
112418	TBC注射器,带固定针头,中头式	1ml	0.5 × 16mm	25G × 5/8"
112419	注射器,带固定针头,中头式	1ml	0.5 × 16mm	25G × 5/8"
112424	古氏注射器 带固定针头 偏头式	5ml	0.7 × 32mm	22G × 1 1/4"
112426	古氏注射器 带固定针头 偏头式	10ml	0.8 × 40mm	21G × 1 1/2"
112429	古氏注射器 带固定针头 偏头式	20ml	1.25 × 40mm	18G × 1 1/2"
112431	古氏注射器 带固定针头,3件式	2ml	0.7 × 19mm	22G × 3/4"

VENOJECT 采血针

Venoject Needles

- 采血针为适用于多管采血的多用采血针
- 且针头设计为穿刺性极佳的双中度斜角
- 有21G和18G两种规格



产品号	名称	100/盒
121521	VENOJECT 采血针 18G x 1.5	100/盒
121523	VENOJECT 采血针 21G x 1.5	100/盒
121525	VENOJECT 采血管套,配5-10ml采血管 25/包	100/盒

121534	采血管10ml	100/盒
121547	EDTA采血管 10ml 100/盒	100/盒

古氏尼龙底座一次性针头

BOVIVET Disposable Needles

覆盖大部分常用尺寸范围的高品质注射针头.
专为兽用领域设计的专业规格.
无热源, 环氧乙烷灭菌



产品号	规格	
121310	古氏尼龙底座针头 1.25 x 38mm 鲁尔锁	100/包装
121325	古氏尼龙底座针头 1.5 x 50mm 鲁尔锁	100/包装
121330	古氏尼龙底座针头 1.6 x 25mm 鲁尔锁	100/包装
121340	古氏尼龙底座针头 1.6 x 38mm 鲁尔锁	100/包装
121350	古氏尼龙底座针头 2.1 x 38mm 鲁尔锁	100/包装
121360	古氏尼龙底座针头 2.1 x 60mm 鲁尔锁	100/包装
121410	古氏尼龙底座针头 2.1 x 80mm 鲁尔锁	100/包装

古氏一次性针头

Disposable Needles



产品号	规格	
121282	1.2 x 40mm 18G x 1 1/2 pink	100/包装装
121283	1.25 x 25mm 18G x 1 pink	100/包装装
121284	1.6 x 25mm 16G x 1 white	100/包装装
121285	1.6 x 40mm 16G1 1/2 white	100/包装装

古氏一次性铝制底座针头

KRUUSE Disposable needle with Aluminium hub

覆盖大部分常用尺寸范围的高品质注射针头.
专为兽用领域设计的专业规格.
无热源, 环氧乙烷灭菌



产品号	规格	
121380	古氏一次性铝制底座针头 1.6 x 25mm	100/盒
121381	古氏一次性铝制底座针头 1.6 x 38mm	100/盒
121382	古氏一次性铝制底座针头 2.0 x 38mm	100/盒
121383	古氏一次性铝制底座针头 2.1 x 50mm	100/盒
121384	古氏一次性铝制底座针头 1.6 x 25mm	100/盒



古氏便携温度计

KRUUSE digital thermometer waterproof, extra long

LCD显示；测温范围32~43.9℃；30秒之内即可读数，自动储存最近的测量数据,长度18cm；防水



产品号	规格
291102	古氏便携防水温度计

古氏便携防水温度计

KRUUSE digital thermometer waterproof

- 防水,带蜂鸣声响
- 测量范围在32~43℃之间
- 可以连续使用200小时



产品号	规格
291103	古氏便携防水温度计

古氏电子温度计

KRUUSE Digi-Temp Digital Thermometer

- 进口产品,新一代动物专用测温计,测量范围35℃~43℃
- 测量精确度可达0.01℃,15秒左右完成体温(肛温)测定
- 液晶显示屏,使用简单,方便快捷



产品号	规格
291110	古氏兽用体温计



不锈钢剪刀

Straight Scissors

产品号	型号
130455	不锈钢剪刀, 尖/钝头, 16cm



141110

手术刀刀柄4号

Handle No. 4

不锈钢, 适用于18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号手术刀刀片

产品号	型号
141110	手术刀刀柄4号



古氏一次性手术刀

KRUUSE Disposable Scalpels

采用非常柔软切韧性好的钢。
100副/盒

产品号	型号
141132	22 号
141141	23 号
141182	24 号



仔猪剪牙钳

Tooth Cutting Forceps

产品号	规格
240566	仔猪剪牙钳 13 cm

磨牙棒

KRUUSE Tooth Grinder International Model

操作简单, 配有充电电池 快速磨去仔猪牙齿, 不会伤及软组织.



产品号	规格
240800	磨牙棒
240805	磨牙器磨头
240807	古氏磨牙棒充电器
240808	古氏磨牙棒电池
240809	磨牙棒塑料盖

古氏多功能去势钳

KRUUSE Combi Castration Forceps

精钢制造, 轻便易操作, 配有手术刀片, 轻松切断睾丸. 刀片配有保护, 避免划伤工作人员.



产品号	规格
240574	古氏多功能去势钳





耳标记号笔

Marker Pen for Ear Tags

产品号
246550

规格
耳标记号笔



耳缺钳

Ear Notcher for Pig

产品号
240560

规格
耳缺钳, 16cm, V型缺口



古氏超级记号笔

KRUUSE Superior Marking Stick



通过国际验证,
产品行销全球

- 无毒配方,对动物皮肤绝对无伤害
- 色泽饱满鲜艳,可保持5-7天
- 多种不同的颜色供选择
- 上色后立即干燥,不容易脱落
- 每盒10支

产品号	规格
240300	古氏超级记号笔, 蓝色, 10/包装 90g
240301	古氏超级记号笔, 红色, 10/包装 90g
240302	古氏超级记号笔, 绿色, 10/包装 90g
240303	古氏超级记号笔, 黑色, 10/包装 90g

古氏记号笔

KRUUSE Marking Stick



通过国际验证,
产品行销全球

- 无毒配方,对动物皮肤绝对无伤害
- 色泽饱满鲜艳,可保持5-7天
- 多种不同的颜色供选择
- 上色后立即干燥,不容易脱落
- 每盒24支

产品号	规格
240313	古氏记号笔 绿色60g×24/包装
240314	古氏记号笔 绿色60g×24/包装
240315	古氏记号笔 蓝色60g×24/包装
240316	古氏记号笔 黑色60g×24/包装

古氏标记喷雾

PORCIMARK Marking Spray

质量优异,可以快速方便的使用于各种气候条件下



- 风干迅速,颜色保存持久
- 三种不同颜色可供选择
- 瓶中喷雾能100%用完
- 无毒配方,通过食品安全监测

产品号	规格
240410	标记喷雾 蓝色 400ml 12/包装
240415	标记喷雾 红色 400ml 12/包装
240420	标记喷雾 绿色 400ml 12/包装



猪用可视耳标

PIG VISUAL EAR TAG

可快捷方便地对家畜进行标记。
所有耳标都是由高品质的塑料（TPU热可塑性聚氨酯）做成，
是特定为家畜开发的持久耐用的耳标。



产品号	规格
246669	Q1U 27mm圆形耳标 黄色
246671	Q3 + Q1 母猪耳标 黄色



246502	Trace耳标钳
--------	----------






古氏耳刺青钳

Tattooing Forceps

- 两种规格可供选择
- 使用舒适, 省力
- 刺青显示清晰准确

产品号	规格
240470	耳刺青钳双排10位数字
240471	耳刺青钳单排5位数字

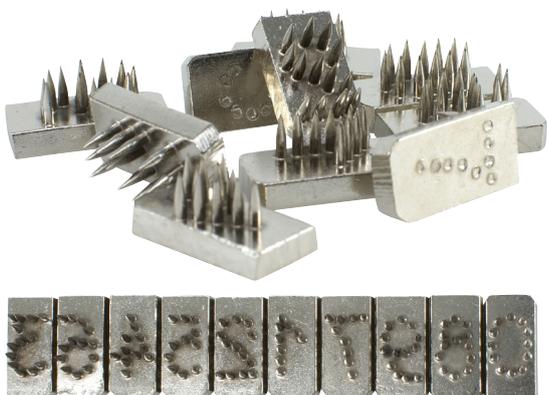

耳刺青钳字母

Tattooing Alphabet

供10mm耳刺青钳240470和240471使用

产品号	规格
240474	字母A-Z 10mm
240475	数字 0-9 10mm



刺青锤

Tattooing hammer

产品号	规格
240541	刺青锤子
240542	数字刺青



刺青墨水

Tattooing Paste

在需要刺青的区域涂抹擦拭使用

产品号	规格
240536	黑色墨水 1L



母猪助产器

Antonius Farrowing Snare



产品号	规格
180405	母猪助产器
180407	助产器不锈钢线

猪保定器, 带手柄

Pig Holder with handle. Solid model



产品号	规格
210346	猪保定器, 带手柄




阉割台

Castration Table

- 快速安全的固定仔猪
- 全部采用不锈钢制成
- 为仔猪的阉割及注射而设计

产品号	规格
997254	阉割台

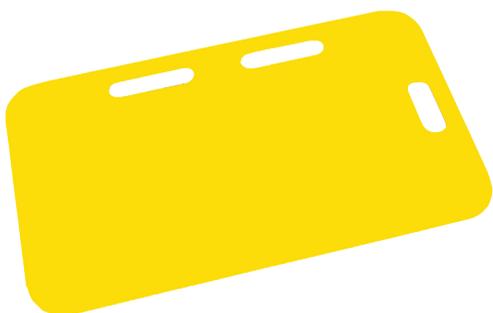

赶猪拍及挡猪板

Sorting Paddle 107 cm, yellow

产品号	规格
210014	赶猪拍 107cm 黄色
210006	挡猪板 红色 48x76cm 黄色
210007	挡猪板 红色 92x76cm 黄色
210008	挡猪板 红色 125x76cm 黄色

古氏弹性电动驱赶器

KRUUSE Flexible Coaxer, w/rechargeable battery



产品号	规格
430001	古氏弹性电动驱赶器



高级气动断尾钳
Super Pro Tail Docker without gas

产品号	规格
210089	高级气动断尾钳



古氏气动断尾钳
KRUUSE Pig Tail Docker without gas

产品号	规格
210094	古氏气动断尾钳

古氏气动断尾钳-配件
Accessories for KRUUSE Tail Docker



产品号	规格
210102	断尾钳蓄气罐
210100	断尾钳刀片

高级气动断尾钳（升级版）
Super Pro Tail Docker without gas (advanced)



产品号	规格
430099	高级气动断尾钳

高级气动断尾钳-配件
Accessories for Super Pro Tail Docker



产品号	规格
210103	断尾钳蓄气罐带刀片
210101	断尾钳刀片



古氏精子瓶盖

Semen Bottle and Caps



产品号	规格
340540	古氏精子瓶盖 蓝色 100/包装
340541	古氏精子瓶盖 黄色 100/包装
340542	古氏精子瓶盖 绿色 100/包装
340543	古氏精子瓶盖 红色 100/包装
340544	古氏精子瓶盖 白色 100/包装



古氏输精管润滑剂

KRUUSE Liquid Catheter Gel

产品号	规格
340625	古氏输精管润滑剂



古氏输精管灭菌润滑剂

KRUUSE Sterile Gel

产品号	规格
340626	古氏输精管灭菌润滑剂

润滑液

BOVIVET gel 1000ml

产品号	规格
180525	润滑液



古氏人工授精产品

KRUUSE AI Products




产品号	规格
340190	古氏子宫深部输精管 单只装 500/箱
340211	经产输精管 单只装 不带润滑剂 500/箱
340212	经产输精管 单只装 带润滑剂 500/箱
340213	初产输精管 单只装 带润滑剂 500/箱
340216	初产输精管 单只装 不带润滑剂 500/箱
340210	经产输精管 五只装 500支/箱
340220	初产输精管 五只装 500支/箱

古氏加热灯

KRUUSE Heating Lamp

产品号	规格
210155	红外线加热灯150w R125 红色
210156	红外线加热灯250w E27 红色



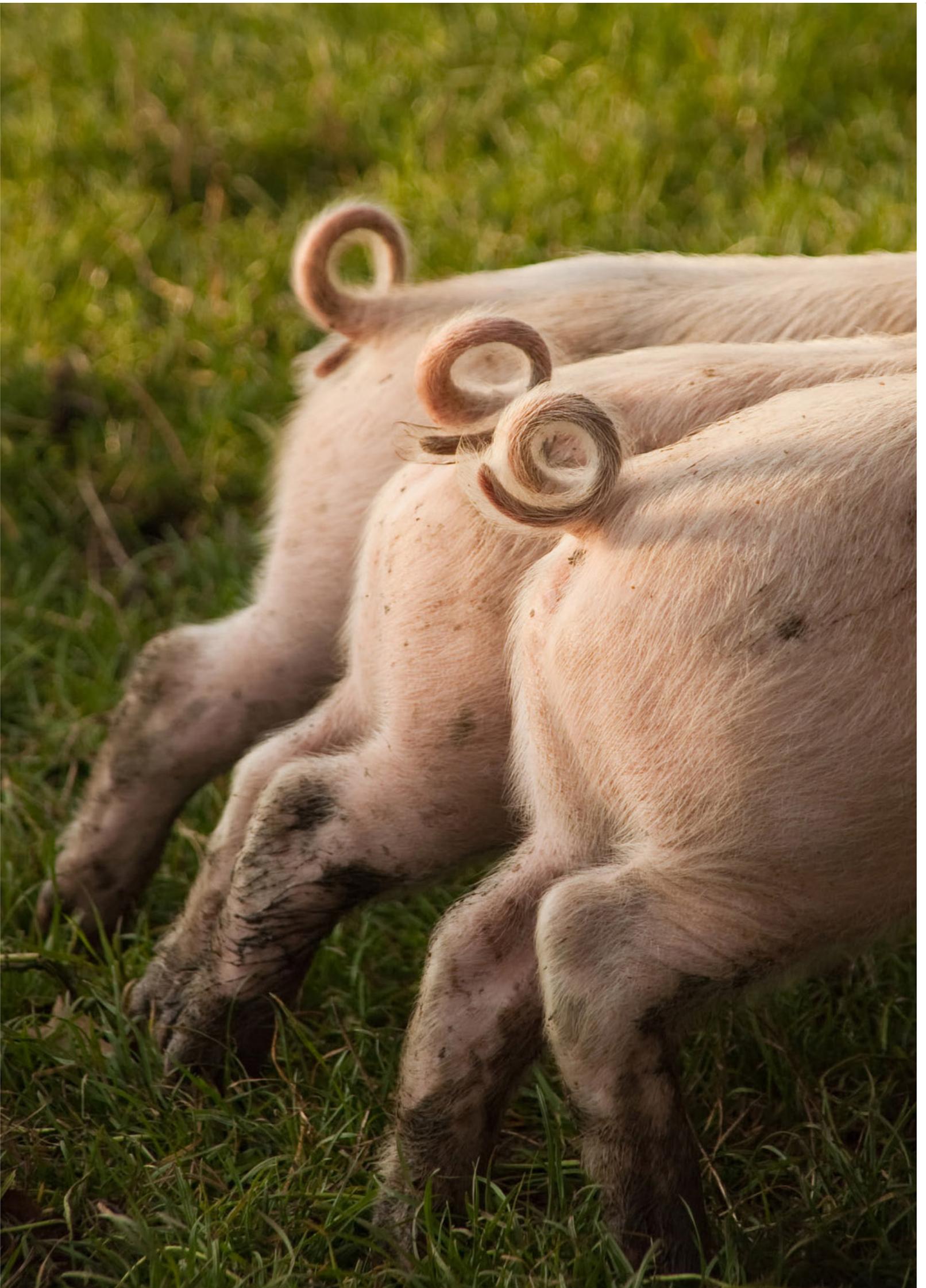



古氏丁腈检查手套

KRUTEX Nitrile Examination Gloves

特点和优点：

- 易于戴上和脱下
- 袖口卷起, 使袖口更紧固
- 细微的纹理结构, 具有较好的潮湿和干燥握持性能
- 超薄, 增强了灵敏度和接触感
- 较好的病毒阻隔性能
- 类似乳胶的弹性和舒适性
- 比标准的丁腈和聚氯乙烯手套较柔软
- 无乳胶
- 无粉
- 无蛋白

产品号	规格
260941	古氏丁腈检查手套-无粉 额外的小号×200/包装
260942	古氏丁腈检查手套-无粉 小号×200/包装
260943	古氏丁腈检查手套-无粉 中号×200/包装
260944	古氏丁腈检查手套-无粉 大号×200/包装
260945	古氏丁腈检查手套-无粉 特大号×200/包装



古氏聚氯乙烯检查手套

KRUTEX Vinyl Examination Gloves, Powder-free

特点和优点：

- 易于戴上和脱下
- 袖口卷起, 使袖口更紧固
- 超薄, 增强了灵敏度和接触感
- 超弹性性能 (抗疲劳)
- 无乳胶
- 无蛋白
- 无粉, 增强了过敏保护作用
- 超柔软, 提供了卓越的用户舒适性

产品号	规格
260880	古氏聚氯乙烯手套-无粉 额外的小号 100/包装
260787	古氏聚氯乙烯手套-无粉 小号 100/包装
260788	古氏聚氯乙烯手套-无粉 中号 100/包装
260789	古氏聚氯乙烯手套-无粉 大号 100/包装
260790	古氏聚氯乙烯手套-无粉 特大号 100/包装



古氏乳胶检查手套, 无粉

KRUTEX Latex Examination Gloves, Powder-free

特点和优点：

- 干燥的手易于戴上和脱下
- 无粉，增强了过敏保护作用
- 手掌纹理结构，具有较好的潮湿和干燥握持性能
- 超薄，增加了灵敏度和接触感
- 无秋兰姆和噻唑等致癌化学物
- 袖口卷起，使袖口更紧固
- 环保材料，可生物降解
- 热水浸取
- 一次氯化法
- 柔软但坚固，远超最低标准要求

有关古达检查手套的技术性能和质量测试资料，请参考第10页上的检查手套的技术规范指南。

产品号	规格
260889	乳胶手套 无粉 额外的小号
260876	乳胶手套 无粉 小号
260877	乳胶手套 无粉 中号
260878	乳胶手套 无粉 大号
260879	乳胶手套 无粉 超大号



古氏长臂检查手套

VALUELINE Examination Gloves

- 坚固耐用的长检查手套，价格适中
- 一般使用于不需要非常好的灵敏度的病例
- 25m μ
- 95cm长
- 100%聚乙烯材质制造
- 每盒装100只

产品号	规格
260690	古氏长臂检查手套 标准号×100/包装

母猪助产手套

Obstetric gloves for pigs, 5 pcs

由多年临床经验的兽医根据猪场生产实际情况开发的一款手套在母猪难产时十分有效，避免了器具的使用



产品号	规格
210109	母猪助产手套, 5只装



古氏一次性外衣

KRUTEX Disposable Suits w/cab

绿色, 高品质, PP材料, 可洗几次.50套/包.

产品号	规格
260608	50套/包,小号
260611	50套/包,中号
260612	50套/包,大号
260613	50套/包,加大号



古氏一次性绿色外套

KRUTEX Disposable Coat green, non-sterile, 25/pk

产品号	规格
260610	古氏一次性绿色外套, 25/包装



古氏一次性绿色外衣

KRUTEX Disposable Suit, green, 20/pk

产品号	规格
260615	古氏一次性绿色外衣, 20/包装



古氏一次性围裙

Disposable Aprons with dispenser 140 cm, 75/pk

产品号
260627

规格
一次性围裙, 140cm, 75/包装



古氏一次性鞋套

KRUTEX Disposable Boots

100%聚乙烯材料, 结实, 耐用, 不滑, 舒适.

产品号
260637

规格
25双/包





PIG BREEDING



古氏贸易（上海）有限公司
上海市长宁区娄山关路83号新虹桥中心大厦909室 200336
9F room 909, New town Center
83 Loushanguan Road
Shanghai 200336
+86 (021) 6209 6025

© KRUUSE 3.2016

www.kruise.com.cn

